



Ultradźwiękowe Jonowe Urządzenie do Czyszczenia Skóry

Instrukcja Obsługi

Witamy na inFace

inFace Ultradźwiękowe Jonowe Urządzenie do Czyszczenia Skóry zostało opracowane i wyprodukowane niezależnie przez firmę Shenzhen Migoosmart Co., Ltd., która jest stowarzyszona z firmą Shenzhen Migoosmart Co., Ltd. Od momentu powstania firmy została zaprojektowana pod kątem praktyczności, funkcjonalności i bezpieczeństwa, mając na celu tworzenie produktów z technologią i inteligencją oraz dążenie do odkrywania i innowacji.

Ostrzeżenie

- Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem produktu i zachowanie jej w odpowiedni sposób. To jest produkt osobisty i nie jest zalecany dla wielu osób.
- Jeśli kabel do ładowania jest uszkodzony, można zamiast niego używać innych kabli Typ-C.
 - Jeśli poczujesz jakikolwiek ból lub nieprawidłowości na skórze lub ciele, natychmiast przerywaj używanie.
 - Podczas czyszczenia i konserwacji urządzenia należy odłączyć wtyczkę zasilania z gniazdka (w stanie wyłączonym).
 - Nie pozwalaj dzieciom używać tego produktu.
 - Nie używaj tego produktu w pobliżu łatwopalnych przedmiotów (alkohol, benzyna, zmywacz do paznokci, spray itp.).
 - Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku upadku lub kolizji, nie używaj go ponownie.
 - Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać tego produktu, o konserwacji proszę skontaktować się z sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony.
 - Aby upewnić się, że napięcie jest zgodne ze specyfikacjami produktu, należy używać kabla do ładowania dostarczonego przez producenta.

- Urządzenie należy czyścić zaraz po użyciu, aby uniknąć gromadzenia się tłuszczu i innych pozostałości.
- To urządzenie nie jest wodoodporne, proszę nie zanurzać produktu w wodzie lub używać kranu do bezpośredniego splukiwania; zakaz używania w wannie, nie używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki lub innych zbiorników wypełnionych wodą.



Nie jest zalecany dla osób następujących:

- Kobiety w ciąży lub w okresie menstruacji.
- Osoby z alergiami, chorobami skóry, zapaleniem skóry, alergiami skórnymi i silnymi oparzeniami słonecznymi.
- Osoby z uszkodzeniami skóry, egzemą, opuchlizną itp.
- Osoby, które właśnie przeszły operację i przechodzą rekonwalescencję
- Osoby, które przeszły operację plastyczną twarzy lub korzystały z wbudowanej chirurgii
- Osoby, które niedawno przeszły odpowiednie zabiegi (np. resurfacing laserowy, peelingi chemiczne lub gojące się rany)
- Osoby z wrodzoną chorobą serca
- Osoby z zaburzeniami nerwu twarzowego
- Osoby, które piją alkohol, przyjmują leki, są nadmiernie zmęczone lub mają słabą kondycję fizyczną



Funkcje

- Głębokie Czyszczenie → Wprowadzenie Odżywiania
- Lifting i Ujędrnianie → Nawilżanie i Rozjaśnianie

Szczegóły Produktu

Otwórz pudełko, a zobaczysz:

- Kabel do Ładowania Typ-C x 1
- Ultradźwiękowe Jonowe Urządzenie do Czyszczenia Skóry x 1
- Instrukcja Obsługi x 1

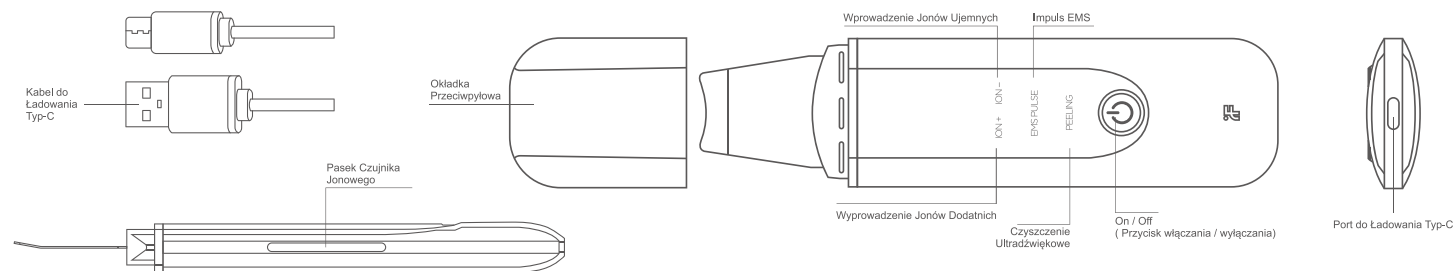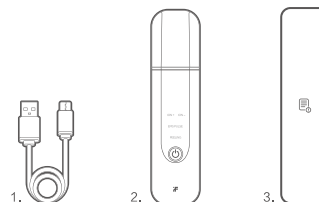

Metoda obsługi: długo naciśnij przez 1,5 sekundy przycisk zasilania, aby włączyć. Krótko naciśnij, aby przejść przez tryby, a następnie długo naciśnij przez 1,5 sekundy, aby wyłączyć.

Instrukcja Obsługi

Czyszczenie

Tryb Czyszczenia Ultradźwiękowego (PEELING) (używany ze środkami do mycia twarzy)

- Zwilżaj twarz ciepłą wodą i używaj środka do mycia twarzy, aby uzyskać pianę.
- Długo naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć, domyślny tryb jest PEELING.
- Z łopatką skierowaną do wewnątrz i łbem skierowaną w dół, blisko do skóry, powoli przesuwaj łopatkę w kierunku przeciwnym do porów w celu czyszczenia przez 3 minuty.



Głębokie Czyszczenie

Tryb Wyprowadzenia Jonów Dodatnich (ION +) (do używania z tonikami / balsamami)

- Nalóż na twarz odpowiedni tonik lub balsam.
- Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać tryb „ION +”.
- Z łopatką skierowaną do wewnątrz i łbem skierowaną w dół, blisko do skóry, powoli przesuwaj łopatkę w kierunku przeciwnym do porów w celu czyszczenia głębokiego przez 3 minuty, a potem splucz twarz ciepłą wodą.



Wprowadzenie Odżywiania

Tryb Wprowadzenia Jonów Ujemnych (ION -) (do używania z esencją / emulsją / maskami)

- Nalóż na twarz odpowiednią esencję / emulsję.
- Wybierz tryb „ION -”.
- Z łopatką skierowaną na zewnątrz i łbem skierowaną do góry, blisko do skóry, powoli przesuwaj łopatkę w kierunku wzdłuż porów i masuj przez 3 minuty.



Łagodzący Masaż

Tryb Impulsu EMS (EMS PULSE) (z kremem ujędrniającym)

- Utrzymuj twarz w stanie wilgotnym.
- Wybierz tryb „EMS PULSE”.
- Z łopatką skierowaną na zewnątrz i łbem skierowaną do góry, blisko do skóry, powoli przesuwaj łopatkę w kierunku wzdłuż porów i masuj skórę przez 3 minuty.



Porady

- Podczas używania trzymaj pasek czujnika jonowego z boku urządzenia. Gdy głowica pielęgnacji dotyka skóry, funkcje EMS i jonów mogą działać normalnie.
- Podczas używania kąta łopatki powinien być ustawiony tak, jak pokazano na rysunku (około 45°).
- Nie pozostawiaj go na jednej części twarzy przez długi czas, ale przesuwaj go powoli.
- Jeśli na twarzy występuje stan zapalny, przed użyciem poczekaj, aż objawy znikną.
- Zaleca się używać 2-3 razy w tygodniu, nie należy używać go wielokrotnie w ciągu jednego dnia.
- Podczas pracy łopatka i korpus powinny być utrzymywane w czystości.



Czyszczenie i Konserwacja

- Nie używaj ostrych przedmiotów, zręcznych, lotnych środków czyszczących do czyszczenia tego urządzenia.
- Urządzenie można delikatnie wytrzeć miękką wilgotną szmatką lub wacikiem.
- Nie należy bezpośrednio splukiwać korpus produktu.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (około 3 miesiące), należy go wyjąć i całkowicie naładować przed przechowywaniem, aby uniknąć uszkodzenia baterii wewnątrz urządzenia z powodu braku energii.

Gwarancja i Serwis Posprzedażowy

- inFace udziela rocznej gwarancji na produkt zgodnie z standardem serwisowym „Krajowe Nowe Trzy Gwarancje”, która rozpoczyna się od daty zakupu.
- W okresie gwarancyjnym, w przypadku awarii produktu spowodowanych wadami materiałowymi lub procesami produkcyjnymi, wymienimy odpowiednio części lub cały produkt.
- Aby ubiegać się o gwarancję, produkt należy przekazać do serwisu posprzedażowego wraz z certyfikatem (fakturą zakupu) potwierdzającym datę zakupu.
- Gwarancja nie obejmuje następujących warunków:
 - Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem, takie jak: użycie niewłaściwego zasilacza, włożenie produktu do niewłaściwego gniazdka lub uszkodzenie spowodowane przez człowieka.
 - Starzenie się i zużycie produktu spowodowane normalnym użyciem, które mają mały wpływ na działanie produktu.
 - Problemy z produktem spowodowane użyciem do innych celów, niewłaściwą obsługą lub nieprofesjonalną naprawą oraz użyciem akcesoriów z innych firm.

Ochrona Środowiska

- Ten produkt oraz materiały opakowaniowe i akcesoria są wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.
- Podziel odpady na różne poziomy recyklingu, w celu ułatwienia recyklingu użytecznych materiałów.



Utylizacja Odpadów

Ten znak na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu wskazuje, że produkt po zakończeniu jego użytkowania nie może być traktowany jako zwykły odpad domowy. W sprawie recyklingu i utylizacji zgodnie z klasyfikacją odpadów należy skontaktować się z lokalnymi władzami.



PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa Produktu: Ultradźwiękowe Jonowe Urządzenie do Czyszczenia Skóry
 Pojemność Baterii: 500mAh
 Napięcie Wejściowe: 3.7V
 Moc Wejściowa: 1.5W
 Rozmiar Produktu: 172 x 42 x 15mm
 Rozmiar Opakowania: 220 x 63 x 40mm
 Waga Netto: Około 85g

Uwaga: Zdjęcia produktów przedstawione w tej instrukcji obsługi oraz wprowadzenie do powiązanych funkcji produktu, a także objaśnienie niektórych terminów służą wyłącznie jako odniesienie, a rzeczywisty produkt ma pierwszeństwo, gdy użytkownik go używa. W związku z polityką ciągłego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

Karta Gwarancyjna

inFace Karta Gwarancyjna

Numer Produktu: _____
 Data Zakupu: _____
 Imię i Nazwisko Użytkownika: _____
 Adres Użytkownika: _____
 Numer Kontaktowy: _____
 Nazwa Produktu: _____
 Informacje o Dystrybutorze:
 Numer Zamówienia: _____
 Opis Awarii: _____

(Prosimy o szczegółowe wypełnienie treści karty gwarancyjnej przy naprawie. Ten produkt objęty jest roczną gwarancją.)



Ultradźwiękowe Jonowe Urządzenie do Czyszczenia Skóry

Nazwa Produktu: _____
 Model Produktu: MST100
 Data Produkcji: _____
 Kontrola Jakości: _____



Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić wielojęzyczną wersję elektronicznej instrukcji obsługi.

Informacje Kontaktowe Serwisu Posprzedażowego

Tel.: 0086-400-007-8388
 Konto Serwisu Wechat: migoosmart
 Godziny Pracy: 9:00-18:00 od poniedziałku do soboty (Czas chiński, dzień wolny w święta i weekendy)



Konto Serwisu Wechat

Informacje Firm: Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.
 Adres: Pokój 807, Blok U6, Junxiang UB Intelligentny Park Przemysłowy, Gushu społeczność, Xixiang Podokręg, Baoan Dzielnica, Shenzhen Miasto, Chiny
 E-mail: service@migoosmart.com
 Kod Pocztowy: 518000



Obsługa Klienta WeChat

※ Ostateczne prawo do interpretacji należy do Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.